


کاغذ جاذب آب Tray-Liner

کد محصول : STTL-30 x 45

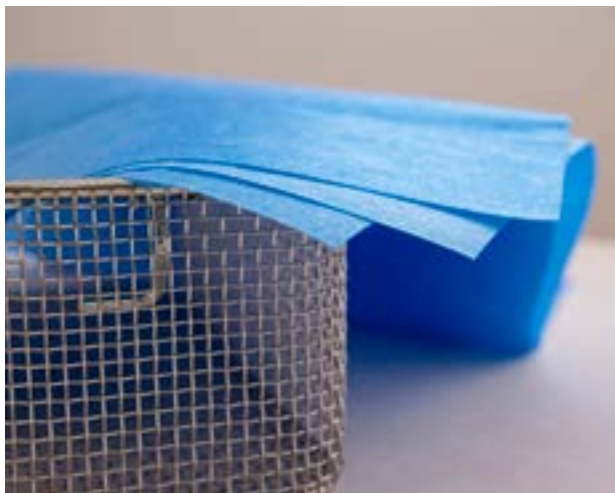

آب عنصر مهمی در استریلیزاسیون است. به ویژه در روش های بخار و اتیلن اکساید، قطرات آب باقیمانده بسیار چالش برانگیز هستند.

هر نوع باقیمانده آب یکی از عوامل تاثیرگذاری در کاهش کیفیت استریلیزاسیون است.

کاغذهای جذب آب Sterdoc به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند قطره های مایع موجود در داخل بسته را جذب کنند تا از عدم آلودگی مجدد بسته اطمینان حاصل شود.

علاوه بر این، در روش اتیلن اکساید، قطره های آب از تماس مستقیم گاز جلوگیری می کنند و بخشی از ابزار که با گاز اتیلن اکساید تماس ندارند استریل نمی شوند.

ویژگی ها:

- جذب بالای آب
- ترکیبی از ویسکوز و پنبه
- در سایزهای مختلف بنا به نیاز بیمارستان ها
- حداقل قدرت جذب کنند ۷۰۰٪
- ساخته شده با پرز بسیار کم
- یکبار مصرف
- مقرون به صرفه
- تاریخ تولید و انقضاء روی بسته بندی

شرایط نگهداری :

- در دمای اتاق (۱۰-۳۸ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۱۰-۷۰٪ و دور از عوامل اکسیدکننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.
- دور از نور خورشید نگهداری شود.

تاریخ انقضا :

۴۸ ماه بعد از تولید

ایران کد: 3822400986220012

GTIN: 8719992310609

IRC: 3489087150933398



IU036-VER.1

STTL-30 x 45